

省力と正確な社会で未来を鮮明にする

開眼用黒色リングピンセットとリングピンセット 検視用ピンセット



現社会において、写真撮影での証拠又は標本保管は重要です。

写真器の解像度が大幅に上がり、被写体を確りと撮影する事のテクニックが必要になってきました。反射が起り難く、ピントズレが極めて起こり難いです。


弊社では、通常使われていたリングピンセットにステンレス自体に含まれているクロムを安定的に黒変化学析出させています。この技術が既に半導体製品分野で確立されている事に着目し、ピンセットへも応用する事が出来ました。

検視官、鑑識官や法医学者の意見を随所に取り込んでいます。巧妙な犯罪に十分対峙できる刺客です。ステンレスに塗料を塗る事やメッキをする事ではないために、**剥がれません。**


強引に傷を付けると黒変させた素地が削れます。

火炎滅菌、オートクレーブ滅菌、薬液滅菌、EOGガス滅菌などステンレス本来を侵すもの以外は全て対しても耐性が在ります。なおステンレスの組成構造は変わっていません。


形状や大きさは似ていて、同等品申請などで価格競争で粗悪品を販売する業者がおりますが、材質や機能に同等品は存在なく価格競争ができるものではありません。実用新案は物真似ではない証拠

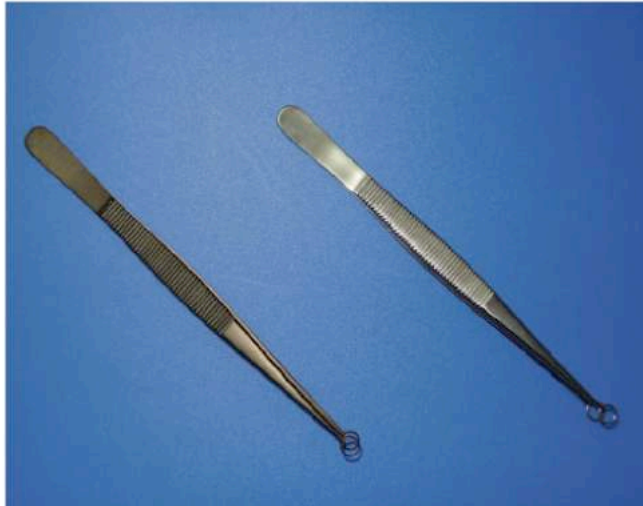

黒色ピンセットと通常のリングピンセット

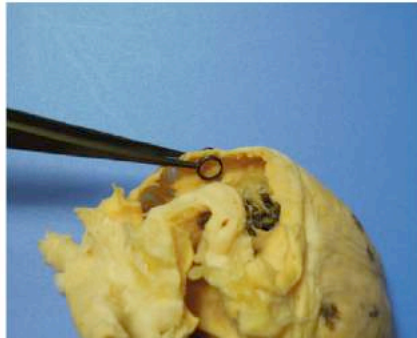

黒色ピンセットを用いて撮影した、心臓のプラスチックネーション標本

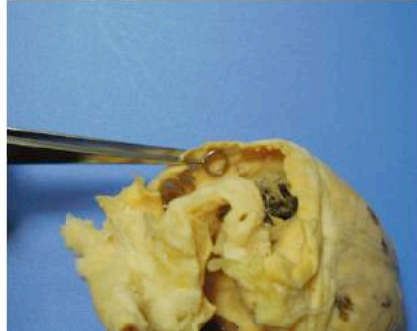

通常のピンセットを用いて撮影した、心臓のプラスチックネーション標本



根拠に基づいて登録された証

■ 開眼用黒色リングピンセット及びリングピンセット 検視用ピンセット

実用新案登録 第3215968号

1. 化学処理を黒色ピンセットは化学処理を行っていますので、持ち手部分に斑が在る場合が在ります。
2. 黒色に発色したクロムは無害です。被接触物に影響を及ぼしません。

名称・荷姿 ● 黒色リングピンセット 長さ115mm リング径6mm
 ● リングピンセット 長さ115mm リング径6mm

総販売元

1本単位での販売が可能



有限会社 川尻工業

理化学技術課 官庁公共システムグループ
〒003-0835 札幌市白石区北郷5条4丁目10番13号

電話 011-875-3172

FAX 011-875-3181

本品は、医療用器具では在りませんので、生体への使用は出来ません。

仕様は性能向上のため予告なしに変更する事があります。

偽造品・模倣品対策事業製品

詳しくはホームページで <http://www.kawajiri-kogyo.jp/>